



Salvaescaleras rectas

Handicare 1000 | Serie Simplicity



Las ventajas de un salvaescaleras recto de Handicare

Si piensa instalar un salvaescaleras, los salvaescaleras Handicare le ofrecerán una solución segura y fiable. Los salvaescaleras de Handicare han ayudado a miles de personas a superar el problema de subir y bajar las escaleras en su casa.

Las guías del salvaescaleras se clasifican en dos categorías básicas: rectos y curvos. Puede que resulte un poco confuso saber qué tipo necesitará para su escalera. Las guías de los salvaescaleras rectos sólo sirven para desplazarse en línea recta, no pueden rodear una esquina o girar una curva. Handicare le ofrece una amplia gama de salvaescaleras que se ajustan a sus necesidades.

La guía se monta en la escalera, no a la pared, por eso es poco probable que tenga que realizar arreglos en la decoración una vez se haya instalado el salvaescaleras. Como todos los salvaescaleras Handicare, el salvaescaleras recto tiene una batería de reserva, lo que quiere decir que seguirá funcionando aún cuando se produzca un corte de electricidad. Usted no necesita preocuparse de quedarse atrapado arriba o abajo.



La seguridad como norma

Todos los salvaescaleras Handicare tienen sensores de seguridad en la unidad de alimentación y en el reposapiés; están diseñados para parar el salvaescaleras si se encontrara con alguna obstrucción. Una vez que se ha detenido, sólo se puede mover en la dirección opuesta a la obstrucción. Todos los salvaescaleras rectos Handicare tienen una visualización de diagnóstico para que pueda vigilar el estado de su salvaescaleras, por ejemplo: se ha activado un borde de seguridad.



Su salvaescaleras está provisto de serie con un cinturón de seguridad para mayor tranquilidad. Nuestro cinturón de seguridad retráctil y fácil de liberar le aporta una flexibilidad añadida, permitiéndole abrochárselo a un lado o en el medio, lo que sea más fácil para usted o los demás usuarios.

Fácil de usar

Todos los salvaescaleras Handicare se accionan pulsando o aguantando el botón de palanca grande y resistente en la dirección del desplazamiento. Al estar situado al final del apoyabrazos, es fácil de operar con la mano o el brazo y deja el apoyabrazos libre para permitir un apoyo sin obstáculos al sentarse o levantarse de la silla.

Todos los salvaescaleras Handicare son suministrados con dos controles remotos que pueden utilizarse para hacer venir el salvaescaleras entre pisos. Esto es especialmente práctico en situaciones con varios usuarios. Los controles remotos que funcionan con pilas pueden montarse en soportes en la pared para que estén a mano cuando se necesiten.





Handicare Simplicity

Si no necesita opciones automáticas, el salvaescaleras Simplicity le ofrece una forma segura y económica de superar el desafío que le supone subir las escaleras. El reposapiés Simplicity y el giro de la silla funcionan manualmente. El Simplicity viene de serie con un cinturón de seguridad con hebilla.

Handicare Simplicity^L

La silla elevadora recta Simplicity^L le ofrece todas las funciones básicas que están disponibles en el modelo de Simplicity, más el beneficio añadido de un reposapiés plegable automático como estándar. Esto significa que usted no tiene que agacharse para plegar y desplegar el reposapiés.

Handicare Simplicity⁺

Para aquellos que necesiten opciones automáticas, el salvaescaleras Simplicity⁺ es una solución elegante para superar el desafío que supone subir las escaleras. Combina la guía de carga continua del Simplicity con la silla Smart, lo que significa que se encuentra disponible en una selección de seis colores. El Simplicity⁺ ofrece la posibilidad de elegir entre opciones de giro y pliegue del reposapiés automático o manual.

La serie Handicare Simplicity

La guía de la serie Simplicity ofrece una función de carga continua, lo que implica que el salvaescaleras se puede aparcar en cualquier parte de la guía cuando no se utiliza. Esto significa que no tiene que preocuparse de donde deja el salvaescaleras en la guía porque la batería se cargará en cualquier posición. A petición del usuario, la serie Simplicity puede equiparse con una articulación manual o una guía deslizante. La serie Simplicity es compatible con la guía deslizante y la articulación manual y automática. Si tiene un marco de puerta cerca de la parte inferior de la escalera, la serie Simplicity le ofrece una gama de soluciones para evitar que la guía cause una obstrucción.

Color para Simplicity & Simplicity^L




ARENA


Opciones de colores para la tapicería Simplicity⁺ & 1000




CACAO

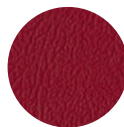


RUBÍ

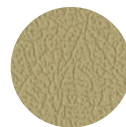


ARENA

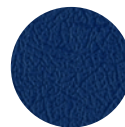

ZAFIRO

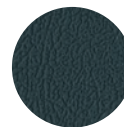

PIZARRA

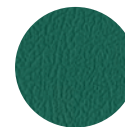

JADE

Tenga en cuenta que los colores reales pueden variar ligeramente de los que se muestran.



Handicare 1000

Para los que buscan una incidencia mínima en las escaleras, el Handicare 1000 ofrece uno de las guías rectos para salvaescaleras más estrechos en el mercado. Está disponible en una selección de seis colores de tapicería y puede ser suministrado con funciones automáticas opcionales, tales como plegar el reposapiés y girar la silla en la parte superior de las escaleras para levantarse de la silla con mayor facilidad. La guía de aluminio tiene una línea estilizada y tiene un tramo oculto que ofrece dos puntos de estacionamiento (de serie) que carga las baterías en la parte superior e inferior de las escaleras.

El Handicare 1000 puede combinarse con una solución de articulación accionada para evitar que la guía obstaculice el marco de la puerta en la base de las escaleras.

Salvaescaleras exterior

No sólo las escaleras interiores de la casa causan problemas para algunas personas. Los escalones de un porche o hacia la puerta principal pueden suponer igualmente una dificultad al subirlos. El salvaescaleras exterior Handicare 1000 es totalmente impermeable y está diseñado para superar los problemas que causa un tramo recto de escaleras exteriores.

Como todos los salvaescaleras Handicare, el modelo exterior dispone de un interruptor de llave para evitar el uso no autorizado del salvaescaleras, lo que significa que puede dejarse sin vigilancia cuando no se esté utilizando. Además de la tapicería en gris pizarra con protección UV, el salvaescaleras Handicare exterior también viene con una cubierta impermeable para mantenerlo protegido de las inclemencias del tiempo, de forma que está siempre listo para usar.



Handicare 1000 XL/XXL

El 1000 XL y XXL Handicare ofrece nuestra capacidad de peso máxima de 160 kg y 200 kg, respectivamente.



Funciones de comodidad



Giro automático

Cuando llegue al final de las escaleras tendrá que hacer girar su silla para que pueda salir hacia el rellano de forma segura. Si elige la opción de giro automático, podrá hacer girar su silla sujetando continuamente el botón de palanca cuando llegue a la parte superior de las escaleras. La silla se moverá automáticamente.



Reposapiés automático

El reposapiés y la silla se pueden plegar para aumentar el espacio disponible dejando las escaleras lo más libre posible para otros usuarios. Si ha elegido la opción de reposapiés automático no tendrá que agacharse para plegar o abrir el reposapiés.



Perch

Si sufre de movimiento restringido en la rodilla o en la cadera sentarse puede resultar doloroso, en estas situaciones el modelo Perch puede ser la solución. Los asientos

modelo perch están disponibles en la Handicare Simplicity+ y el 1000.

¿Necesita una guía articulada?

Para que la silla pueda bajar lo suficientemente para que el usuario pueda sentarse en ella, es necesario que la guía se extienda más allá de las escaleras hacia el suelo de la entrada. Algunas casas tienen el marco de la puerta cerca de la parte inferior de las escaleras y la guía puede formar un obstáculo. En estos casos, hay que instalar una guía articulada. Esto significa que la guía se puede plegar del marco de la puerta dejando el acceso libre.



Las sillas de serie Simplicity y 1000 de Handicare, están disponibles con una guía articulada manual. La Handicare 1000 también está disponible con una guía articulada automático. Cuando se opera el salvaescaleras desde el botón de palanca, la articulación sube o baja automáticamente.



Guía deslizante

La guía deslizante es una solución innovadora que puede utilizarse con un salvaescaleras recto de serie Simplicity. Esta solución única elimina la necesidad de una articulación, porque la guía se mueve simultáneamente con la silla hacia arriba, dejando el marco de la puerta en la base de las escaleras sin obstaculizar.

Salvaescaleras rectas Handicare: guía de referencia rápida

Opciones de sillas	Simplicity ^(L)	Simplicity ⁺	1000	1000 XL	1000 XXL	
Selección de tapicería	-	✓	✓	✓	✓	Una selección de seis colores significa que usted puede elegir la tapicería que mejor combine con su decoración.
Articulación manual	✓	✓	✓	✓	-	Para poder levantarse y sentarse en el salvaescaleras lo más fácil posible.
Giro automático	-	○	○	○	✓	Permite la rotación de la silla del salvaescaleras para poder levantarse y sentarse lo más fácil posible.
Espaciadores de apoyabrazos	-	○	○	○	-	Aumentan la distancia entre los apoyabrazos del asiento Smart de 550mm a 590mm.
Espaciadores de apoyabrazos extendidos	-	○	○	○	✓	Aumentan la distancia entre los apoyabrazos del asiento Smart de 550mm a 637mm.
Base de asiento extendida	-	○	○	○	✓	Aumenta la profundidad del asiento Smart de 360mm a 425mm.
Asiento Perch	-	○	○	○	-	Ideal para usuarios que no pueden doblar bien las caderas o las rodillas.
Versión exterior	-	-	○	○	-	Diseñado para uso en el exterior, por ejemplo, hasta la puerta de entrada.
Cinturón abrochable	✓	-	-	-	-	Este cinturón negro tiene una hebilla que se aprieta en ambos lados para actuarlo.
Cinturón de velcro	-	○	○	○	-	Este cinturón negro tiene velcro en ambos extremos para mantenerlo firmemente en posición.
Cinturón de velcro XXL	-	○	○	○	✓	Este cinturón negro extra largo tiene velcro en ambos extremos para mantenerlo firmemente en posición.
Cinturón retráctil	-	✓	✓	✓	-	Este cinturón retráctil de color crema se puede abrochar en un lado o en el centro.
Opciones de reposapiés	Simplicity ^(L)	Simplicity ⁺	1000	1000 XL	1000 XXL	
Manual	✓	✓	✓	✓	✓	El reposapiés se pliega y despliega manualmente.
Accionado desde la silla	✓*	○	○	○	○	Pliega el reposapiés cuando se pliega la silla.
Accionado desde el apoyabrazos	-	○	○	○	○	El reposapiés se puede levantar y bajar mediante un interruptor debajo del apoyabrazos mientras el usuario está sentado.
Características del riel	Simplicity ^(L)	Simplicity ⁺	1000	1000 XL	1000 XXL	
Se carga en cualquier lugar del riel.	✓	✓	-	-	-	El salvaescaleras se carga en cualquier lugar que se estaciona en el riel.
Múltiples puntos de carga	-	-	✓	✓	✓	Utilice el telemando para aparcar en los puntos de carga.
Riel anodizado línea estilizada	-	-	✓	✓	✓	El riel estrecho maximiza el espacio libre en las escaleras después de la instalación del salvaescaleras.
Incidencia nula en el rellano	○	-	-	-	-	Para situaciones en las que el riel podría obstruir el vano de una puerta en la parte superior de la escalera.
Articulación manual	○	○	○	-	-	Para situaciones en las que el riel podría obstruir el vano de una puerta en la parte inferior de la escalera.
Articulación automática	-	-	○	-	-	Desplaza el riel automáticamente mientras se mueve el salvaescaleras, dejando los vanos de las puertas libres de obstrucciones.
Guía deslizante	○	○	-	-	-	El riel se mueve junto con el salvaescaleras, dejando los vanos de las puertas libres y eliminando la necesidad de una articulación.
Capacidad de peso	Simplicity ^(L)	Simplicity ⁺	1000	1000 XL	1000 XXL	
Peso máximo estándar	140kg**	140kg**	137kg	160kg	200kg	
Cumplimiento de las normas	Simplicity ^(L)	Simplicity ⁺	1000	1000 XL	1000 XXL	
EN81-40	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Disponible de serie ○ Opcional - No disponible

* Sólo disponible para el modelo Simplicity^L **120 kg con articulación/guía deslizante

Hacer la vida cotidiana más fácil

Experiencia


Comodidad al servicio de las personas...y esto es exactamente lo que los sistemas de salvaescaleras de Handicare ofrecen desde hace más de 125 años. Con perfección técnica, soluciones inteligentes y aplicaciones seguras, las innovaciones de Handicare no solo han proporcionado mayor comodidad, sino también salvaescaleras más elegantes...en su estilo, a su gusto. Calidad superior en todos los aspectos, hacen el salvaescaleras de Handicare un objeto valioso para mayor independencia en la casa. Muchos usuarios contentos lo experimentan diariamente.

Calidad y seguridad

Ofrecemos todos nuestros productos con una garantía de dos años. Un salvaescaleras de Handicare asegura alta calidad: calidad en términos de seguridad, innovación, comodidad y diseño. Además, todos nuestros productos han sido probados y aprobados por servicios de inspección independientes en todo el mundo. Esto le da la seguridad de que todos nuestros productos cumplen con las normas más altas de calidad y seguridad.



EN81-40



handicare

Handicare Stairlifts B.V.
Newtonstraat 35
1704 SB Heerhugowaard
Los Países Bajos

T +31 (0)72 576 88 88
T +31 (0)72 574 34 35
stairlifts@handicare.com
www.handicare.com

Tenga en cuenta que los colores reales pueden variar ligeramente de los que se muestran. Toda la información se proporciona de buena fe pero no constituye una garantía. Handicare se reserva el derecho de modificar los diseños y especificaciones sin previo aviso.